


Valmyndir

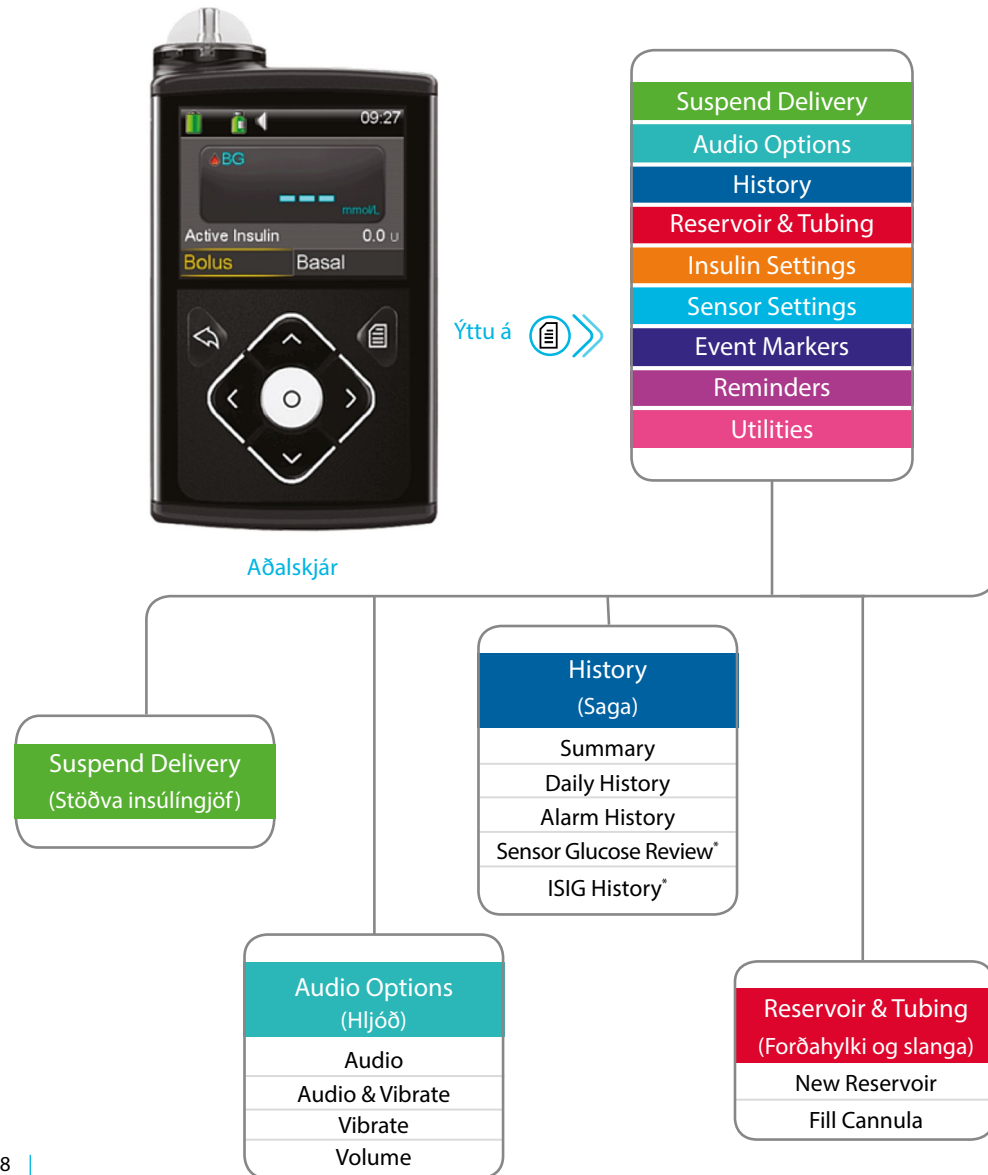

Leiðsögn

Ýttu á frá hvaða skjá sem er til að opna Valmyndina.

Ýttu á og til að fletta á milli valmöguleika.


Ýttu á í valdri valmynd til að opna.

Flettistiki kemur fram í valmyndunum til að gefa til kynna hvort um frekari teksta sé að ræða.

Ýttu á til að fletta niður og skoða fleiri möguleika.

Ýttu á til að fletta upp til baka.

Ýttu á til að komast í fyrri valmynd. Haltu niðri til að komast í aðalskjá.

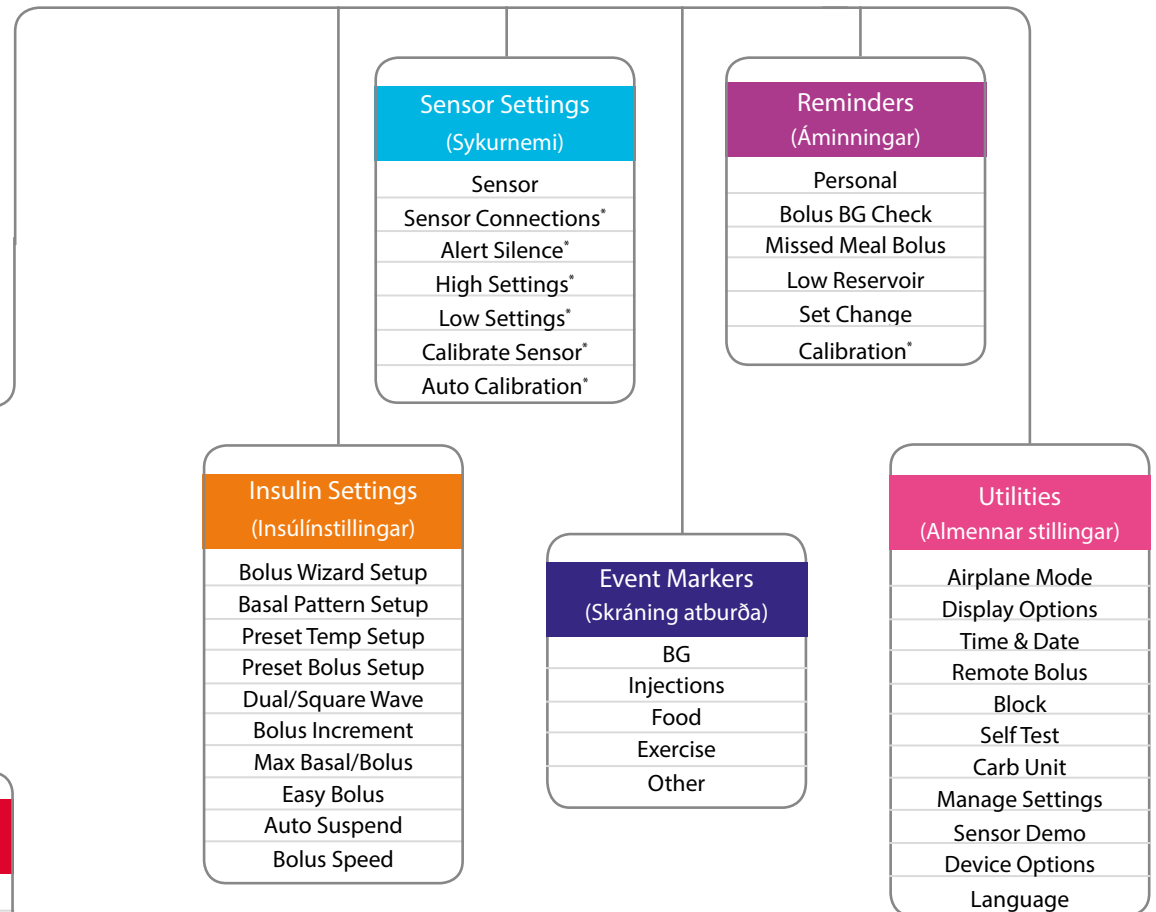

* Aðeins til staðar þegar kveikt er á sykurnema